



# Home Medical Visits

Diagnostic Medical Testing  
Patient's Are Our First Priority

Tel: (877) 202-1191 \* Fax: (866) 637-2890

## **INSTRUCCIONES PARA LA PRUEBA NOCTURNA, RESPIRANDO EL AIRE DE SU HABITACIÓN** **Using Respironics 920M / Nonin 8500M**



Su prescripción médica ordena la oximetría nocturna para medir el nivel de oxígeno y frecuencia cardíaca durante el sueño, respirando el aire de su habitación.

Observe que: No podrá utilizar el oxígeno (si lo tiene en casa) durante el tiempo que dure la prueba. Si experimenta falta de aliento, vuelva a ponerse el oxígeno y continúe la prueba. Simplemente registre, en la página PATIENT INFORMATION, la hora en que comenzó a usar el oxígeno.

### **PASO 1: AJUSTAR**

1. Limpie sus uñas para remover cualquier tipo de productos cosméticos.


2. Asegúrese de que el cable esté correctamente enchufado

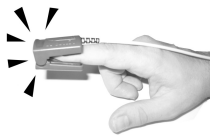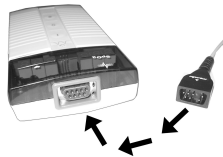

3. Introduzca el dedo hasta el fondo del sensor y apoye el cable sobre el nudillo. No debe utilizar el dedo pulgar.

### **PASO 2: INICIAR LA PRUEBA**

1. Encienda el oxímetro con el botón superior que tiene el símbolo ( I ). En este momento, el visor tendría que mostrar dos números de color rojo con una luz momentánea.

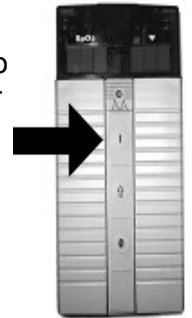

2. En PATIENT ACTIVITY LOG, introduzca la fecha y hora de inicio de la prueba.

### **PASO 3: DORMIR**

1. Acuéstese.
2. Deje encendido el oxímetro durante toda la noche.
3. Procure que el oxímetro esté bien sujeto para que no caiga al suelo.
4. No retire las baterías del oxímetro, dado que ello borra el registro de la prueba.
5. Puede cambiar de dedo cuando el sensor le cause irritación.

### **PASO 4: TERMINAR LA PRUEBA**

1. Cuando se despierte a la mañana siguiente, apague el oxímetro manteniendo presionado el botón que tiene el símbolo ( 0 ) hasta que el visor se ponga en blanco.
2. Retire el dedo del sensor.
3. En PATIENT ACTIVITY LOG, registre la fecha y hora en que haya terminado la prueba.



**IMPORTANTE:** Complete todos los formularios que se le hayan dado y entréguelos cuando el repartidor pase a recoger el equipo.

**COMUNÍQUESE CON NOSOTROS SI TIENE PREGUNTAS O INQUIETUDES SOBRE LA PRUEBA.**